

**Appareil à massage intelligent pour le cou**

**Appareil à massage intelligent  
pour le cou**



## Précautions

### Danger

- Veuillez ne jamais utiliser le produit avec les appareils électroniques médicaux suivants :
  1. Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques médicaux implantables;
  2. Coeur et poumons artificiels et autres dispositifs électroniques médicaux de survie;
  3. Électrocardiographes et autres appareils électroniques médicaux;
- \* Ces appareils électroniques médicaux peuvent provoquer des dysfonctionnements et mettre la vie en danger.

### Attention

- Si le patient applique le dispositif chirurgical haute fréquence et le produit sur le corps en même temps, l'électrode du produit peut provoquer des brûlures et endommager le produit.
- Si le produit est utilisé à proximité (1 m) d'un appareil de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes, la sortie du produit peut être instable.
- L'électrode doit éviter tout contact avec des blessures et des cicatrices au cours du traitement.
- Lorsque vous utilisez le produit, ne placez pas l'électrode près du cœur du thorax, sinon le risque de fibrillation cardiaque augmentera.
- Le produit est recommandé pour une utilisation par un seul utilisateur. Lorsqu'il est utilisé par différents utilisateurs, nettoyez l'électrode du produit avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez le produit, collez l'électrode fermement et uniformément sur la peau.
- L'électrode de ce produit a une fonction génératrice de chaleur. Lorsque la fonction de compression à chaud est appliquée sur la même partie pendant une longue période (plus de 15 minutes), cela peut provoquer des brûlures à basse température.

- Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou après l'utilisation, arrêtez de l'utiliser et consultez un médecin.
- Dans les cas suivants, consultez votre médecin avant utilisation, sinon cela peut provoquer des accidents ou provoquer une gêne physique.
  1. Les patients sous traitement médical et qui ressentent un inconfort.
  2. Patients présentant des nerfs cardiaques et cérébraux anormaux.
  3. Les patients dont la température corporelle dépasse 38 degrés (période de fièvre).
  4. Les patients atteints de maladies infectieuses.
  5. Patients présentant des troubles de la perception cutanée ou des anomalies cutanées.
  6. Patients sous médication.
  7. Patients ayant une tension artérielle anormale.
  8. Des patients qui ne sont pas libres d'exprimer leurs souhaits.
  9. Patients présentant une déficience sensorielle due à des troubles circulatoires périphériques élevés tels que le diabète.
  10. Patients avec allergies cutanées aux électrodes en acier inoxydable.
- L'utilisation dans les conditions suivantes est interdite:
  1. Patients atteints de tumeurs malignes
  2. Patients avec tendance hémorragique
  3. Femmes enceintes, femmes en repos forcé
  4. Patients d'inflammation suppurée aiguë
  5. Utilisateurs de stimulateurs cardiaques
  6. Patients avec implants métalliques
  7. Près du cœur
- Ne l'appliquez pas près du cœur, au-dessus du cou, de la tête, de la bouche, des organes génitaux ou des troubles cutanés et ne traitez pas la plante des pieds simultanément. De plus, ne compressez pas les organes internes lors de l'utilisation. Sinon, un accident ou un inconfort physique peut survenir.
- Ne pas utiliser avec d'autres appareils médicaux ou plus de 2 produits. Sinon, des nausées ou un inconfort physique peuvent survenir.

- Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans le manuel d'instructions. Sinon, un accident ou un dysfonctionnement peut survenir.
- N'utilisez pas l'électrode avec une surface ébréchée ou endommagée. Sinon, des accidents ou des dysfonctionnements peuvent survenir.
- Ne démontez, réparez ou modifiez pas ce produit sans autorisation. Sinon, un dysfonctionnement ou un choc électrique peut se produire.

#### Note

- Si vous ne vous sentez pas bien en raison d'une anomalie de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Si votre corps ou votre peau vous semble étrange, consultez votre médecin et suivez ses conseils.
- Si vous souhaitez déplacer le coussin ou le placer sur une autre personne pendant le massage, assurez-vous de couper l'alimentation avant de le déplacer.
- Ne pas traiter tout en ayant des dispositifs électroniques. Sinon, l'appareil électronique pourrait mal fonctionner (par exemple, le trouble de la montre électronique).
- En cas de fonctionnement anormal, coupez immédiatement l'alimentation électrique et retirez-la. Sinon, des températures élevées ou des courts-circuits peuvent se produire et entraîner un accident. Dans le même temps, contactez le service client pour obtenir des conseils après-vente.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble de chargement USB avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un accident.
- Ne l'utilisez pas pour les enfants ou les personnes qui n'ont pas d'expressivité, sinon cela pourrait provoquer un accident ou une gêne.
- Ne l'utilisez pas dans un endroit très humide, comme une salle de bain, et ne l'utilisez pas pendant le bain. Sinon, vous risquez de recevoir un choc électrique violent et d'endommager le produit.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous dormez. Sinon, cela peut entraîner un dysfonctionnement du corps principal. De plus, le coussin peut se déplacer vers d'autres parties et provoquer une gêne.


- Ne l'utilisez pas en conduisant une voiture, sinon cela pourrait causer une gêne physique due à une stimulation excessive, entraînant un accident.
- Ne collez pas l'électrode sur la zone affectée pendant une longue période. Sinon, cela peut provoquer une inflammation de la peau.
- Lors du massage, n'utilisez pas les pièces métalliques des ceintures, des colliers, etc. pour toucher l'électrode, sinon vous pourriez recevoir un choc électrique violent.
- N'appliquez pas le produit au même endroit pendant une longue période (plus de 30 minutes), sinon cela pourrait provoquer une fatigue musculaire au niveau du site de massage et provoquer un inconfort physique.
- Veuillez porter ce produit correctement et l'utiliser sur la colonne cervicale. Portez-le symétriquement. Sinon, des accidents ou une gêne physique peuvent survenir.
- Lorsque vous débranchez le câble de chargement USB du corps, ne tirez pas sur le câble, mais tirez plutôt sur la fiche du câble et retirez-la. Sinon, cela peut entraîner un choc électrique ou endommager le produit.
- L'électrode du produit a une fonction de chauffage de surface pour les utilisateurs qui ne sont pas sensibles à la chaleur ou sujets à des allergies à la chaleur.
- Veuillez consulter un médecin avant utilisation.
- Lorsque le produit fonctionne pendant une longue période, la surface sera chaude, ce qui est normal.
- Lorsque la pile de la télécommande est épuisée, remplacez-la par une pile neuve du même modèle dès que possible. Modèle de batterie: CR2032
- Lors du remplacement de la pile de la télécommande, n'installez pas la réversibilité pol.
- Une fois la pile de la télécommande épuisée, jetez-la conformément aux réglementations en vigueur dans votre lieu de résidence.

#### Suggestion

- Veuillez vous assurer que le bouton hôte fonctionne correctement.

- Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, ou si la batterie perd de l'énergie après que le produit est resté inactif pendant une longue période, veuillez effectuer l'opération de charge conformément au manuel d'instructions pour vous assurer qu'il peut fonctionner normalement.
- Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez le mettre au rebut conformément aux réglementations de protection de l'environnement en vigueur dans la ville, sinon cela pourrait entraîner une pollution de l'environnement.
- Il est recommandé aux personnes âgées de 16 ans et plus.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans les endroits suivants:
  1. Endroits exposés à la lumière directe du soleil
  2. Endroits soumis à des températures et à une humidité élevées
  3. Lieux avec de l'eau
  4. Endroits poussiéreux
  5. Lieux près des feux d'artifice
  6. Endroits sensibles aux chocs de vibration
  7. Lieux électromagnétiques puissants

## Diagramme du produit

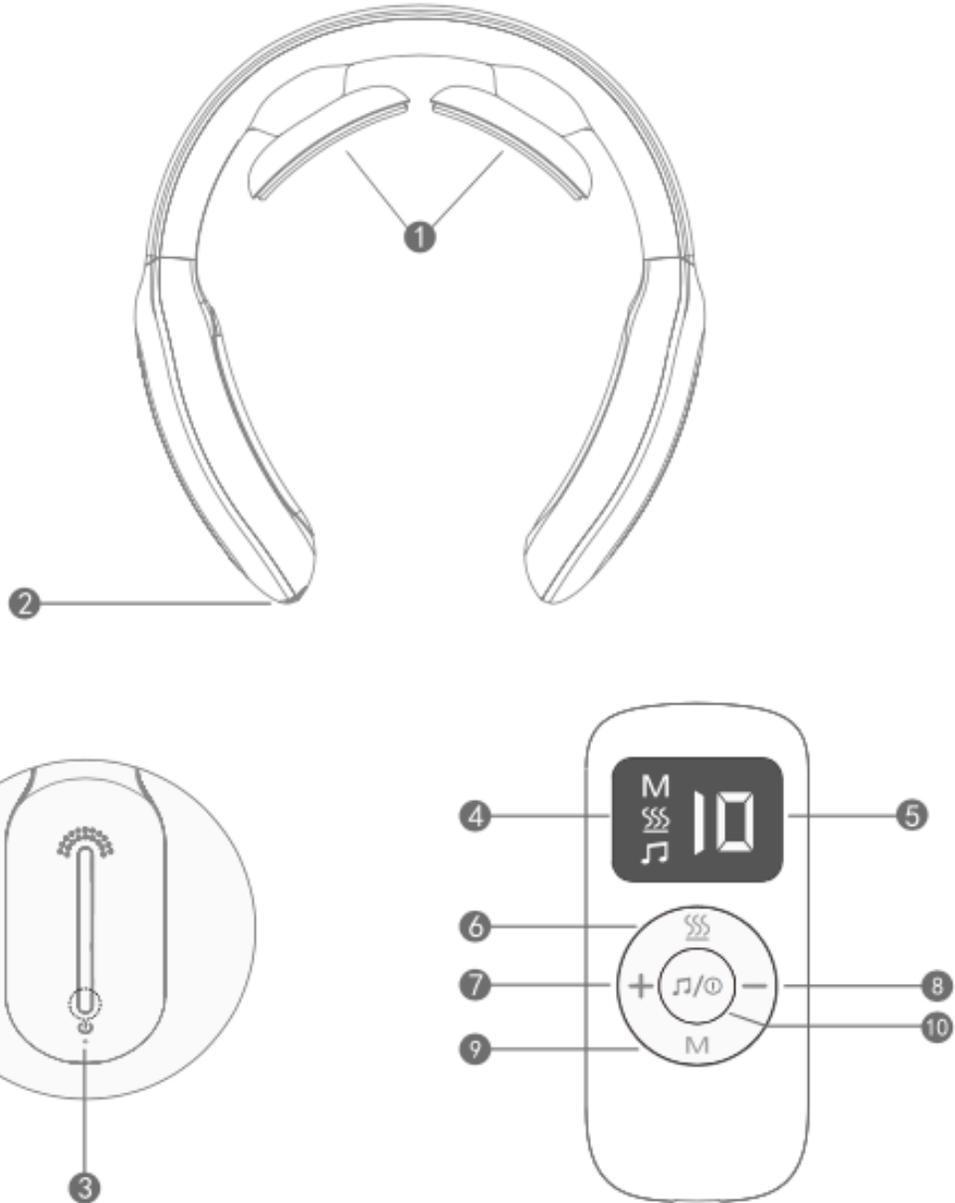

1. Électrode

2. Interface de recharge

3. Interrupteur

4. Affichage de la  
fonction

5. Affichage de la

vitesse

6. Bouton chaleur

7. Augmenter intensité

8. Réduire intensité

9. Bouton mode

10. Bouton  
télécommande/voix

## Méthode d'utilisation

1. Avant utilisation, mouillez d'abord la peau de la colonne cervicale avec une serviette humide, puis placez le produit autour du cou. Rendre l'électrode près de la peau de la colonne cervicale. Ajustez la position du produit. Hébergez et ajustez l'intensité et le mode de massage appropriés.
2. Appuyez sur le bouton «extrémité inférieure de la pièce décorative plaquée» et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le produit s'allumera (vous entendrez une invite vocale) pour entrer dans le mode par défaut. Appuyez longuement sur le bouton «partie décorative galvanisée inférieure» pendant deux secondes lorsque l'appareil est sous tension et le produit s'éteint.
3. Sélection du mode (mode acupuncture, mode tapotement et mode automatique). Utilisez la touche de mode de la télécommande. Appuyez sur la touche mode pour changer de mode. Il existe trois modes. Chaque fois que vous appuyez dessus, le message vocal retentit, le mode est incrémenté une fois et les trois modes peuvent être commutés cycliquement. Chaque fois que vous changez de mode, la vitesse revient au niveau par défaut 0.
4. Sélection de vitesse
  - a. À la mise sous tension, le bouton + est un bouton de renforcement de la force. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous entendez un message vocal et l'intensité augmente d'un niveau. L'intensité est divisée en 15 niveaux. Si vous appuyez sur + au niveau 15, l'intensité reste inchangée.
  - b. Le bouton - est un bouton pour réduire la force. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous entendez un message vocal et l'intensité baisse d'un niveau. Si vous appuyez sur - au niveau 0, l'intensité reste inchangée.
5. Sélection de chauffage
  - a. Le bouton  est le bouton de chauffage. Appuyez sur le bouton d'arrêt du chauffage et arrêtez la fonction de chauffage avec deux bips sonores.
6. Fonction de chronométrage
  - a. Le produit est prévu pour 15 minutes. Lorsque le produit est mis sous tension, il s'éteint automatiquement après 30 minutes.

- b. Lorsque l'hôte est allumé, le produit s'éteint automatiquement dans 30 minutes s'il n'est pas mis sous tension normalement.
7. Fonction d'alarme et de charge basse tension
  - a. Alarme de basse tension: lorsque le produit est hors tension, le voyant rouge clignote normalement. Branchez le câble de données USB sur l'hôte pour le charger. Lors de la charge, le voyant de respiration rouge clignote et lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge est allumé pendant une longue période.
  - b. Modèle à piles de la télécommande: CR2032. Lors du remplacement, veuillez noter que le pôle positif de la batterie est orienté vers le haut.

### Astuces

- Le chronométrage automatique du produit est de 15 minutes. Lorsque le produit est allumé sans charge et sans chauffage, il s'éteint automatiquement après 3 minutes.
- Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé après utilisation.
- Ne placez pas d'autres poids sur le produit.
- Ne tirez pas sur la fiche en caoutchouc du port de chargement USB, car cela pourrait provoquer une rupture et une chute.

### Maintenance de routine

- Lors du nettoyage et de la maintenance de ce produit, veuillez éteindre l'hôte. Utilisez une serviette en papier humide pour nettoyer l'électrode. Lorsqu'il est particulièrement sale, utilisez un peu d'alcool médical (75% d'alcool) pour essuyer et désinfecter.
- Veuillez essuyer avec un détergent neutre et un chiffon doux lors de l'entretien quotidien. N'utilisez pas de détergent corrosif et ne le placez pas dans l'eau pour le trempage ou le lavage.
- Pendant le processus de nettoyage, l'eau ou d'autres liquides doivent être empêchés de pénétrer dans le corps pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques pendant l'utilisation.

## Dépannage

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez consulter les conseils et solutions suivants.
- Si le produit est toujours défectueux ou ne peut pas être utilisé, mettez-le hors tension.
- Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le produit eux-mêmes. Le démontage ou la réparation par eux-mêmes causera des dommages au produit et entraînera la nullité de la garantie. La société ne sera pas responsable des conséquences qui en découlent.

Problèmes	Cause/Solution possible
Problème de démarrage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le chronométrage automatique du produit est de 15 minutes.</li><li>• Lorsque le produit est allumé sans charge et sans chauffage, il s'éteint automatiquement après 3 minutes.</li></ul>
Échec de la charge ou aucun voyant de charge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez vérifier si le câble USB, l'hôte et l'adaptateur d'alimentation du téléphone sont connectés.</li></ul>
Affichage normal, mais aucune stimulation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le coussinet entre-t-il directement en contact avec la peau? Ajustez la position pour qu'elle soit proche de la peau.</li><li>• Y a-t-il des cheveux ou des vêtements, des bijoux, etc. entre les coussinets et la peau? Éloignez-vous ou supprimez des éléments.</li><li>• Le niveau d'intensité est-il à 0? Augmentez l'intensité du massage.</li></ul>
Sensation de picotement	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'électrode du massEUR et la peau du cou sont-elles étroitement en contact? Ajustez la position pour qu'elle colle à la peau.</li><li>• Le temps de massage est-il trop long? Il est recommandé de masser pendant 15 minutes à la fois, deux fois par jour.</li><li>• L'intensité du massage est-elle trop élevée? Ajustez au niveau bas.</li><li>• La peau est-elle allergique à l'électrode? Les personnes souffrant d'allergies graves doivent d'abord être désensibilisées.</li><li>• Le climat est-il froid et la peau sèche? Utilisez une serviette humide pour humidifier la peau et utilisez-le produit après.</li></ul>

Stimulation faible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'électrode du massEUR et la peau du cou sont-elles étroitement en contact? Ajustez la position pour qu'elle colle à la peau et ajustez l'intensité.</li> <li>• L'électrode est-elle sale ou huileuse? Nettoyez la surface de l'électrode.</li> <li>• La batterie est-elle faible? Veuillez charger si la batterie est faible.</li> <li>• Le niveau d'intensité du massage est-il trop bas? Augmentez l'intensité du massage.</li> </ul>
--------------------	---

### Paramètres du produit

Couleur	Blanc / Rose / Bleu
Poids	160 g
Spécifications	PC, silicone
Pile	Lithium
Information sur la pile	800 mAh
Critère d'entrée	DC / 5 V
Puissance	1,5 W
Courant statique	<10 µA
Origine	Shenzhen, Chine
Standard d'exécution	GB4706,1

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et le manuel. En cas de modification sans préavis, l'apparence du produit en nature prévaudra.

Ce livre a été soigneusement vérifié, mais il peut y avoir des erreurs d'impression ou une mauvaise compréhension du contenu. Veuillez comprendre, la société se réserve le droit d'expliquer.