


# Brosse à dents sonique rechargeable - Instructions

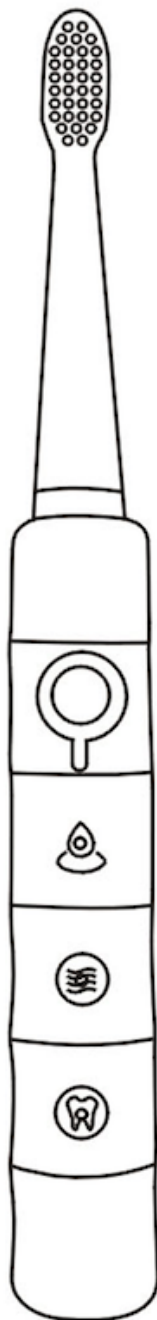

Lire ceci avant d'utiliser cet appareil  
Merci d'avoir acheté la brosse à dents rechargeable sonique

Ce guide d'utilisation contient les instructions pour bien utiliser ce produit de façon sécuritaire. Veuillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation et assurez-vous de le garder en lieu sûr.

### **Instructions d'utilisation sécuritaires**

1. Veuillez ne pas utiliser hors des conditions d'utilisation spécifiés.
2. Lorsque connecté à une source de courant, vérifiez si la tension est appropriée à votre tension locale.
3. Veuillez utiliser le chargeur original afin d'éviter tout danger.
4. Veuillez éviter d'utiliser avec produits abrasifs
5. Ne pas appliquer une force trop grande sur les dents ou les gencives
6. Les enfants et personnes à la bouche affaiblie ne devraient pas utiliser ce produit
7. Ne pas utiliser lorsque vos dents sont en cours de traitement ou si vos implants ne sont pas solides
8. Ne pas échapper ni cogner le produit
9. Ne pas plonger le produit dans l'eau pour une période prolongée
10. Ce produit est destiné à une utilisation personnelle seulement et n'est pas disponible pour les cliniques dentaires ou organisations à plusieurs patients

### **Attention**

Les enfants et personnes à facultés mentales ou physiques réduites doivent être supervisés par leur gardien pendant l'utilisation de ce produit


En cas de maladie parodontale et symptômes oraux, veuillez utiliser le produit selon les recommandations du médecin

Si vous vivez un inconfort ou de la douleur dans votre bouche, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un dentiste

Lorsque le produit arrivera à la fin de sa vie utile, veuillez consulter les organismes responsables de la disposition de produits électroniques afin de maximiser la protection de l'environnement

### **Mode d'emploi**

1. Mouillez la tête de la brosse à dents et appliquez une quantité appropriée de pâte à dents sur celle-ci.
2. Placez les soies sur vos dents à 45° en alignement avec vos gencives.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer ou arrêter le brossage
4. Déplacez les soies doucement là où vous voulez nettoyer. Vous n'avez pas à exercer une pression très forte. La brosse à dents sonique utilise des vibrations haute-fréquence pour nettoyer vos dents, alors vous n'avez qu'à utiliser 1/8 de la force que vous utiliseriez avec une brosse à dents ordinaire.
5. Les dentistes recommandent de brosser chacun des 4 cadrans (voir la figure ci-dessus) de façon égale pendant environ 30 secondes chacun. L'appareil a une fonction de rappel qui effectue une pause à toutes les 30 secondes pendant 0,5 secondes afin de vous signaler qu'il est temps de passer à un autre cadran.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer le brossage et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension. Cette brosse possède 6 modes : nettoyage (fort/faible), doux (fort/faible) et blanchiment (fort/faible). Vous pouvez appuyer sur le mode de votre choix selon vos besoins et la brosse le gardera en mémoire pour la prochaine utilisation.

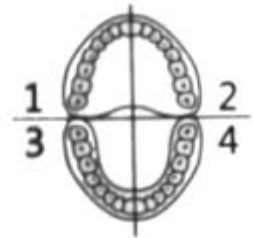

## Fonctions du produit

1. Vibrations soniques haute-fréquence : 31 000 vibrations acoustiques haute-fréquence par minute qui aident à réduire l'apparence des taches (même les taches de thé et de cigarette) en seulement 15 jours
2. Concept ergonomique : Résistant à l'eau, antidérapant, confortable, sécuritaire et fiable
3. Recharge rapide USB : Débranchez le câble étanche située sur la face inférieure de la brosse à dents. Branchez le câble DC dans le port de recharge de la brosse à dents puis insérez l'extrémité USB dans un ordinateur ou une prise compatible 5 V. Le temps de recharge maximal est de 6 heures. La lumière verte clignote lentement pendant la recharge et devient statique quand la charge est complète.
4. Trois têtes de brosse à dents : Vient avec 3 têtes remplaçables à tout moment, à tout endroit, pour des soins prolongés de votre santé buccale.
5. Capuchon de sécurité : Le capuchon de sécurité aide à prévenir les invasions bactériennes et rend le transport plus pratique et propice à une bonne santé.

## Nom de chaque partie



— Bouton Marche/Arrêt

— Nettoyage (fort/faible)

— Doux (fort/faible)

— Blanchiment (fort/faible)

Lumière verte clignote rapidement quand batterie faible


Lumière verte clignote lentement pendant la recharge

Lumière verte statique quand charge complète

## Installation de la tête de brosse à dents



Tirez dans le sens de la flèche pour retirer la tête de brosse à dents

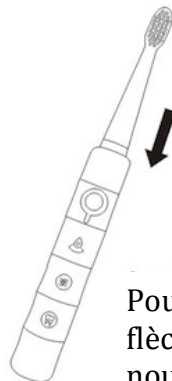

Poussez dans le sens de la flèche pour installer une nouvelle tête

## Spécifications et standards d'implémentation

Paramètre	Spécification
La batterie est pleine (voyant lumineux statique)	Poids : Manche pèse environ 56 g
Batterie rechargeable : Lithium ion 500 mA	Dimensions : 208 x 24 x 24 mm
Tension nominale : DC5V 50/60 Hz	Six modes : Nettoyage (fort/faible), Doux (fort/faible), Blanchiment (fort/faible)
Courant nominal : 3,7 V 300 mA	Soies : Soies en nylon souple ondulées DuPont
Vitesse du moteur : 16500 rpm	Vibrations soniques haute-fréquence : 31000/min
Puissance nominale : 1 W lors de la recharge	

## Accessoires



3 têtes de brosse à dents



1 capuchon antipoussière



1 câble de recharge USB

## Protection de l'environnement

L'emballage externe est constitué de matériaux bruts éco-responsables et peut donc être jeté à la poubelle.

Lorsque le produit arrivera à la fin de sa vie utile, veuillez consulter les organismes responsables de la disposition de produits électroniques afin de maximiser la protection de l'environnement